


イムノエース[®]Flu 操作方法

株式会社 **タウンズ**
お問い合わせ先 ☎0120-048-489


■ 検体採取

咽頭ぬぐい液

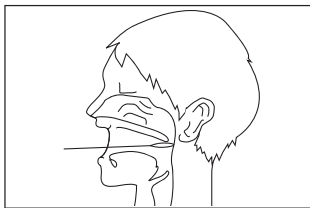


別売りの咽頭・角結膜用スワブで検体を採取します。

鼻腔ぬぐい液

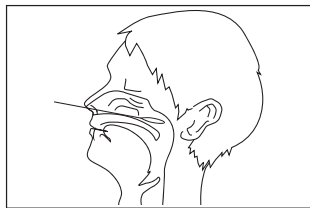

キット付属のスワブで検体を採取します。

鼻腔吸引液

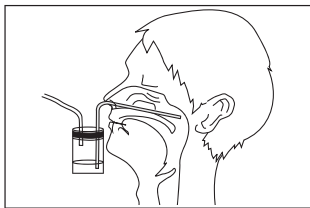

キット付属のスワブを浸します。
(マイクロピペット等で採取する場合は、生理食塩水で2倍希釈し、200 μ Lを採取します。)

鼻汁鼻かみ液




鼻をかんだ後、キット付属のスワブで検体を採取します。




キット付属のスワブで鼻前庭部の鼻汁を採取します。


■ 試料調製

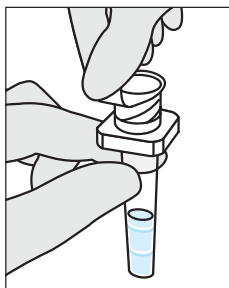

検体抽出液の容器のアルミシールを液が飛び散らないように剥がします。

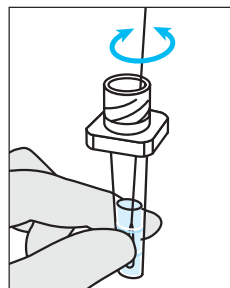


検体採取後のスワブを検体抽出液に浸し、容器の外側からスワブの頭部を軽くつまみ5回以上左右に回転させ、上下に動かし攪拌します。抽出後、容器の外側からスワブの頭部をつまみ、試料を絞り出すようにスワブを引き抜き、試料とします。
(生理食塩水で2倍希釈した鼻腔吸引液を使用する場合は、200 μ Lを検体抽出液に加えてよく混和し、試料とします。)

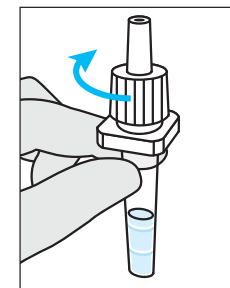

検体抽出液の容器の上端に付属のノズルを被せてしっかりと閉めます。

■ 試料滴下

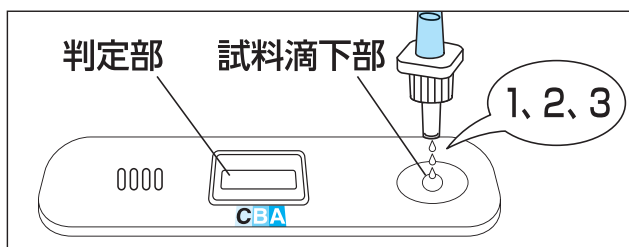

検体抽出液の容器の中ほどをつまみ、テストプレートの試料滴下部に試料3滴を滴下します。

⚠ 注意
テストプレートは開封後すぐに使用してください。

注意事項

- ① 滴下するとき、検体抽出液の容器は垂直に保持し、ノズルの先端が試料滴下部に触れないよう注意してください。
- ② テストラインは、ラインの濃淡にかかわらず、目視で確認できれば陽性です。
- ③ ラインは色分けにより区分されている各判定部内であれば、その位置にかかわらず有効です。
- ④ フィルターに目詰まりするほどの強粘性の試料は、生理食塩水で2倍希釈して使用してください。
- ⑤ 抗原量が非常に多い場合には、新しい検体抽出液1本に対して試料を3滴滴下し、希釈調製したものを試料としてください。
- ⑥ 吸引器、咽頭・角結膜用スワブ等は、キットに含まれておりません。
- ⑦ 鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液の一部を他の試験に使用する方法については、添付文書をお読みください。
- ⑧ 滴下量が多すぎた場合には、本品の測定原理から白金-金コロイド標識抗体が希釈されることにより反応が遅延し、判定時間内に判定部[C]及び/又は[A]又は[B]にラインが認められない、又はラインが薄くなる場合があります(偽陰性)。

■ 判定

