

体外診断用医薬品

製造販売承認番号22700EZX00027000

※2017年 3 月改訂(第4版)

※2016年11月改訂(第3版)

ヒトメタニューモウイルスキット

イムノエース[®] hMPV

【一般的な注意】

1. 本品は、ヒトメタニューモウイルス抗原を迅速に検出するための試薬です。確定診断は、臨床症状や分離培養等、他の検査結果と合わせて担当医師が総合的に判断して行ってください。
2. テストプレートは吸湿すると品質が劣化し、正確な結果が得られませんので、アルミ袋を開封後直ちに使用してください。
3. 本品は体外診断用のみに使用し、それ以外の目的では使用しないでください。
4. 本添付文書に記載された用法・用量及び注意事項に従って使用してください。記載された操作方法及び使用目的以外での使用については結果の信頼性を保証いたしかねます。
5. 検体抽出液にはアジ化ナトリウム等が含まれていますので、誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

【形状・構造等(キットの構成)】

1. テストプレート

白金-金コロイド標識抗ヒトメタニューモウイルスモノクローナル抗体(マウス)

抗ヒトメタニューモウイルスモノクローナル抗体(マウス)

2. 検体抽出液(共通試薬)^{注)}

緩衝剤、界面活性剤、0.09%アジ化ナトリウム

注)検体抽出液は以下の4品目で共通して使用可能です。

販売名: イムノエースFlu(インフルエンザウイルスキット)

販売名: イムノエース アデノ(アデノウイルスキット)

販売名: イムノエースRSV Neo(RSVウイルスキット)

販売名: イムノエースhMPV(ヒトメタニューモウイルスキット)

検体	Flu	アデノ	RSV Neo	hMPV
鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液	○	○	○	○
鼻汁鼻かみ液	○	×	×	×
咽頭ぬぐい液	○	○	×	○
角結膜ぬぐい液	×	○	×	×

<付属品>

スワブ、ノズル

【使用目的】


鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液中のヒトメタニューモウイルス抗原の検出(ヒトメタニューモウイルス感染の診断の補助)

【測定原理】

本品の測定原理はヒトメタニューモウイルス抗原を認識するモノクローナル抗体を用いた免疫クロマトグラフ法である。

本品は、試料滴下部、白金-金コロイド標識抗ヒトメタニューモウイルスモノクローナル抗体(マウス)(以下、白金-金コロイド標識抗ヒトメタニューモウイルス抗体と記す)を含む試薬部、抗ヒトメタニューモウイルスモノクローナル抗体(マウス)(以下、抗ヒトメタニューモウイルス抗体と記す)および抗マウス免疫グロブリンポリクローナル抗体(ウサギ)(以下、抗マウス免疫グロブリン抗体と記す)を固定化した展開部から構成される短冊状の担体を内蔵したテストプレートである。


テストプレート各部の名称

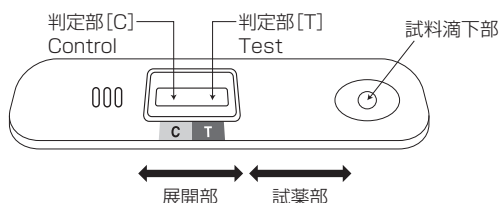

テストプレートの試料滴下部に試料を滴下すると白金-金コロイド標識抗ヒトメタニューモウイルス抗体が溶解し、試料中のヒトメタニューモウイルス抗原と免疫複合体を形成する。この免疫複合体は展開部を毛細管現象により移動し、展開部に固定化された抗ヒトメタニューモウイルス抗体に捕捉され、判定部 [T] に白金-金コロイドによる黒色のラインを形成する。本キットはこの黒色のラインを目視で確認し、試料中のヒトメタニューモウイルス抗原の存在の有無を判定する。

一方、試料中のヒトメタニューモウイルス抗原の存在の有無に関わらず、余剰の白金-金コロイド標識抗ヒトメタニューモウイルス抗体が展開部をさらに移動し、展開部に固定化された抗マウス免疫グロブリン抗体に捕捉され、判定部 [C] に白金-金コロイドによる黒色のラインを形成する。これは白金-金コロイド標識抗ヒトメタニューモウイルス抗体が正常に展開部を移動したことを示す。

免疫クロマトグラフィーによるヒトメタニューモウイルス抗原の検出

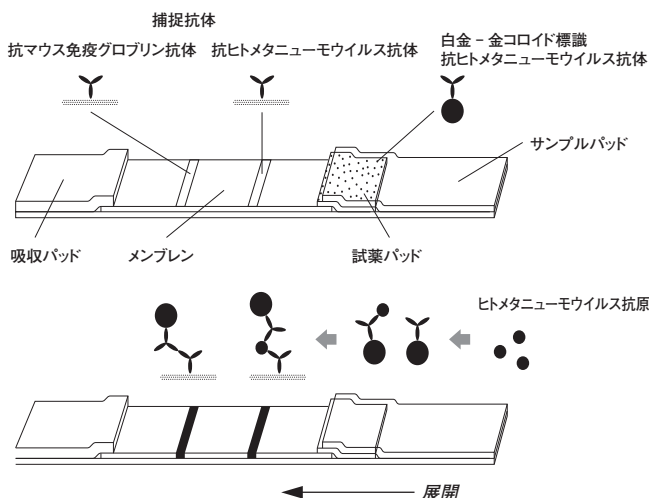

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取法
 - 1) 採取した検体は、できる限り早く【用法・用量(操作方法)】に従い試料調製を行ってください。
 - 2) 全ての検体は感染の危険性があるものとして、十分に注意して取扱ってください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

以下の一般用医薬品、処方薬に関して、記載した濃度では判定への影響が認められませんでした。

市販かぜ薬(1mg/mL)、市販のど飴(40mg/mL)、市販点眼薬2種(0.25mL/mL)、市販点鼻薬2種(0.025mL/mL)、市販うがい薬(0.1mL/mL)、市販口腔内洗浄液(0.25mL/mL)、アセチルサリチル酸(2mg/mL)、アマンタジン塩酸塩(5mg/mL)、オキシメタゾリン塩酸塩(1 μ g/mL)、キキョウ末(0.1mg/mL)、エリスロマイシン(1mg/mL)、ザナミビル(1 μ g/mL)、ジフェンヒドรามミン塩酸塩(1mg/mL)、ミノサイクリン塩酸塩(0.1mg/mL)、デキストロメトルファン臭化水素酸一水和物(1mg/mL)、クラリスロマイシン(2mg/mL)、(R)-(-)-フェニレフリン塩酸塩(1mg/mL)、カフェイン(2mg/mL)

【用法・用量(操作方法)】

1. 試薬の調製方法



- 1) テストプレート
そのまま用いる
- 2) 検体抽出液
そのまま用いる

本品を冷蔵保存していた場合は冷蔵庫から出して30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用ください。

2. 本品に含まれないが検査実施に必要な器具、器材、試料等

- 1) 器具、器材
時計又はタイマー
- 2) 試料

(1) 検体の採取方法

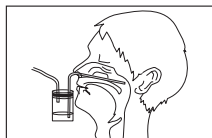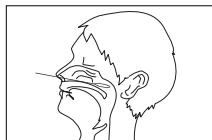

① 鼻腔ぬぐい液の採取方法

キット付属のスワブを鼻腔にしっかり挿入し、鼻甲介を数回こするようして粘膜表皮を採取します。

② 鼻腔吸引液の採取方法

i) 吸引トラップの片方のチューブを吸引ポンプに、もう一方のチューブを外鼻孔から鼻腔にしっかり挿入します。吸引ポンプを作動させて鼻腔液を吸引トラップに採取します。

ii) トラップに採取した鼻腔吸引液にキット付属のスワブを浸して液をよく吸収させます。
マイクロピペット等で採取する場合は、鼻腔吸引液を生理食塩水で2倍希釈し、200 μ Lを採取します。

③ 咽頭ぬぐい液の採取方法

別売の咽頭・角結膜用スワブを口腔から咽頭にしっかり挿入し、咽頭後壁、口蓋扁桃の発赤部位を中心に数回こするようして粘膜表皮を採取します。

採取時は、だ液に触れないように注意してください。

付属のスワブは鼻腔用です。咽頭用としては、別売りの咽頭・角結膜用スワブをご使用ください。

(2) 試料の調製方法

検体抽出液の容器のアルミシールを液が飛び散らないように剥がします。検体採取後のスワブを検体抽出液に浸し、容器の外側からスワブの頭部を軽くつまみ5回以上左右に回転させ、上下に動かし攪拌します。抽出後、容器の外側からスワブの頭部をつまみ、試料を絞り出すようにスワブを引き抜き、試料とします。

生理食塩水で2倍希釈した鼻腔吸引液を使用する場合は、200 μ Lを検体抽出液に加えてよく混和し、試料とします。

(3) 試料調製上の注意

- ① フィルターに目詰まりするほどの強粘性の試料は、生理食塩水で2倍希釈して使用してください。
- ② イムノエース アデノ用として角結膜ぬぐい液から調製した試料は、イムノエースFlu、イムノエースRSV Neo及びイムノエースhMPVには使用できません。
- ③ イムノエースFlu用として鼻汁鼻かみ液から調製した試料は、イムノエース アデノ、イムノエースRSV Neo及びイムノエースhMPVには使用できません。
- ④ イムノエースFlu用、イムノエース アデノ用及びイムノエースhMPV用として咽頭ぬぐい液から調製した試料は、イムノエースRSV Neoには使用できません。
- ⑤ 検体抽出液の共通使用に関しては、1頁の表を参照してください。

(4) 操作方法

- ① 検体抽出液の容器の上端に付属のノズル(フィルター付き)を被せてしっかりと閉めます。
- ② 検体抽出液の容器の中ほどをつまみテストプレートの試料滴下部に、試料3滴(80~120 μ L)を滴下します。このとき検体抽出液の容器は垂直に保持し、ノズルの先端が試料滴下部に触れないよう注意してください。
- ③ 3~8分後にテストプレートの判定部を観察し、【測定結果の判定法】に従って判定します。

(5) 試料滴下時の注意

滴下量が多すぎた場合には、本品の測定原理から白金-金コロイド標識抗体が希釈されることにより反応が遅延し、判定時間内に判定部[C]及び/又は[T]にラインが認められない、又はラインが薄くなることがあります(偽陰性)。

【測定結果の判定法】

1. 測定結果の判定方法


操作方法に従って反応させ、判定部に現れる黒色のラインにより判定を行います。



陽性

判定部[T]及び[C]の両方にラインが認められた場合(2本のライン)を陽性と判定します。


判定部[T]にわずかでも黒色のラインが認められたら陽性と判定します。

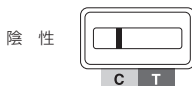

陰性

判定部[T]に黒色のラインが認められず、判定部[C]にのみ黒色のラインが認められた場合(1本のライン)を陰性と判定します。

判定部[C]の黒色のラインは、薄くても目視で確認できれば正常にクロマト展開が行われていることを示しています。

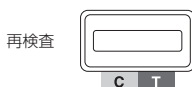


再検査

判定部[C]に黒色のラインが認められない場合は、測定操作上の問題、あるいは試薬の品質上の問題が考えられます。別のテストプレートで検査をやり直してください。

また、抗原量が非常に多い場合には、判定部[T]に非常に濃い黒色のラインが認められ、判定部[C]に黒色のラインが認められないことがあります。このような場合は、2.判定上の注意3)に従って、試料を検体抽出液で希釈して再検査してください。

再検査

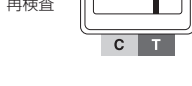

ラインは色分けにより区分されている各判定部内であれば、その位置にかかわらず有効です。

2. 判定上の注意

- 1) 試料滴下後3~8分で判定部[T]及び[C]の両方に黒色のラインが認められる場合は陽性、8分放置しても判定部[T]に黒色のラインが認められない場合は陰性と判定してください。判定時間を過ぎたテストプレートは乾燥等により結果が変化するため、判定には使用しないでください。

- 2) 操作上の問題、あるいは試薬の品質上の問題により判定部 [C] に黒色のラインが認められない場合があります。別のテストプレートで検査をやり直してください。やり直しても同様の結果であれば、検体要因やだ液の影響により判定部 [C] に黒色のラインが認められない場合もありますので、試料を検体抽出液で2倍希釈して再検査してください。
- 3) 抗原量が非常に多い場合には、判定部 [T] に非常に濃いラインが認められ、判定部 [C] にラインが認められないことがあります。このような場合は試料を検体抽出液で希釈して再検査してください。
- 例) 試料の希釈方法：新しい検体抽出液1本に対し試料を3滴滴下し、十分に混和し試料とする。
- 4) ラインの濃さにムラがあるものや途切れているものもラインとしては有効です。

【性能】

1. 性能

【用法・用量(操作方法)】欄の操作方法により陽性コントロール(4.8×10³~9.6×10³TCID₅₀/テスト)、弱陽性コントロール(6.0×10²~2.4×10³TCID₅₀/テスト)及び陰性コントロール(検体抽出液)を用いて感度、正確性、同時再現性の各試験を行った場合、以下の規格に適合する。

1) 感度

陽性コントロール及び弱陽性コントロールを試料として試験するとき、陽性が確認される。

2) 正確性

陽性コントロール、弱陽性コントロール及び陰性コントロールを試料として試験するとき、陽性コントロール及び弱陽性コントロールは陽性、陰性コントロールは陰性が確認される。

3) 同時再現性

陽性コントロール、弱陽性コントロール及び陰性コントロールを試料として各3回同時に試験するとき、陽性コントロール及び弱陽性コントロールは全例陽性、陰性コントロールは全例陰性が確認される。

2. 最小検出感度

本品の最小検出感度は、以下の通りである。

A型：4.5×10²TCID₅₀/テスト

B型：3.0×10²TCID₅₀/テスト

3. 交差反応性試験成績

下記のウイルス及び細菌等との交差反応は認められなかった。

1) ウイルス

Adenovirus Type1	Adenovirus Type2
Adenovirus Type3	Adenovirus Type4
Adenovirus Type5	Adenovirus Type6
Adenovirus Type7	Adenovirus Type10
Adenovirus Type11	Adenovirus Type14
Adenovirus Type18	Adenovirus Type19
Adenovirus Type22	Adenovirus Type37
Adenovirus Type40	Adenovirus Type53
Adenovirus Type54	Influenzavirus A, (H1N1)
Influenzavirus A, (H1N1) pdm09	Influenzavirus A, (H3N2)
Influenzavirus B	Respiratory syncytial virus A
Respiratory syncytial virus B	

2) 細菌

<i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Aspergillus niger</i>
<i>Bordetella pertussis</i>	<i>Burkholderia cepacia</i>
<i>Candida albicans</i>	<i>Candida glabrata</i>
<i>Chlamydia trachomatis</i>	<i>Chlamydomydia pneumoniae</i>
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Enterococcus gallinarum</i>
<i>Escherichia coli</i>	<i>Haemophilus aphrophilus</i>
<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>
<i>Haemophilus paraphrophilus</i>	<i>Kingella kingae</i>
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Legionella anisa</i>
<i>Legionella bozemanii</i>	<i>Legionella dumoffii</i>
<i>Legionella gormanii</i>	<i>Legionella jordanis</i>
<i>Legionella longbeachae</i>	<i>Legionella micdadei</i>

<i>Legionella pneumophila</i> SG-1	<i>Legionella pneumophila</i> SG-2
<i>Legionella pneumophila</i> SG-3	<i>Legionella pneumophila</i> SG-4
<i>Legionella pneumophila</i> SG-5	<i>Legionella pneumophila</i> SG-6
<i>Legionella pneumophila</i> SG-7	<i>Legionella pneumophila</i> SG-8
<i>Legionella pneumophila</i> SG-9	<i>Legionella pneumophila</i> SG-10
<i>Legionella pneumophila</i> SG-11	<i>Legionella pneumophila</i> SG-12
<i>Legionella pneumophila</i> SG-13	<i>Legionella pneumophila</i> SG-14
<i>Legionella pneumophila</i> SG-15	<i>Listeria monocytogenes</i>
<i>Moraxella catarrhalis</i>	<i>Mycobacterium kansasii</i>
<i>Mycobacterium marinum</i>	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
<i>Proteus mirabilis</i>	<i>Proteus vulgaris</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Serratia marcescens</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
<i>Streptococcus agalactiae</i>	<i>Streptococcus bovis</i>
<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	<i>Streptococcus mitis</i>
<i>Streptococcus mutans</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
<i>Streptococcus pneumoniae</i> Type 1	<i>Streptococcus pneumoniae</i> Type 3
<i>Streptococcus pneumoniae</i> Type 5	<i>Streptococcus pneumoniae</i> Type 19F1
<i>Streptococcus porcinus</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i>
<i>Streptococcus sanguinis</i>	<i>Streptococcus</i> sp. Group C
<i>Streptococcus</i> sp. Group D	<i>Streptococcus</i> sp. Group F
<i>Streptococcus</i> sp. Group G	

4. 相関性試験成績

1) 鼻腔ぬぐい液

		対照品			
		陽性	陰性	合計	
本品	陽性	72	8 ^(注②)	80	陽性一致率：100.0%
	陰性	0	111	111	陰性一致率：93.3%
	合計	72	119	191	全体一致率：95.8%

(注②)8検体は全てPCR法陽性

		PCR法			
		陽性	陰性	合計	
本品	陽性	80	0	80	陽性一致率：92.0%
	陰性	7	104	111	陰性一致率：100.0%
	合計	87	104	191	全体一致率：96.3%

2) 鼻腔吸引液

		対照品			
		陽性	陰性	合計	
本品	陽性	96	5 ^(注①)	101	陽性一致率：100.0%
	陰性	0	194	194	陰性一致率：97.5%
	合計	96	199	295	全体一致率：98.3%

(注①)5検体は全てPCR法陽性

		PCR法			
		陽性	陰性	合計	
本品	陽性	101	0	101	陽性一致率：87.1%
	陰性	15	179	194	陰性一致率：100.0%
	合計	116	179	295	全体一致率：94.9%

3) 咽頭ぬぐい液

		PCR法			
		陽性	陰性	合計	
本品	陽性	107	0	107	陽性一致率：91.5%
	陰性	10	54	64	陰性一致率：100.0%
	合計	117	54	171	全体一致率：94.2%

5. 較正用基準物質に関する情報

較正用の基準物質として、ヒトメタニューモウイルス(Human Metapneumovirus)の培養液を用い、以下のように設定した。基準培養液のウイルス感染価測定
ヒトメタニューモウイルス(Human Metapneumovirus)液を用いて10⁶の希釈系列を作製し、各希釈液の一定量を細胞に接種、培養し、一定の期間で細胞変性効果(CPE)を観察、記録し、CPE陽性の数より感染価を求めた。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上(危険防止)の注意

- 1) 検体抽出液が目等に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い流してください。異常があれば、医師の手当てを受けてください。
- 2) 検体抽出液が手や衣服についた場合には、付着部又は接触部を石鹸水又は多量の水で十分に洗い流してください。
- 3) 検体、試料等をこぼした場合は、次亜塩素酸ナトリウム等ですみやかに消毒してください。

2. 使用上の注意

- 1) 添付文書に記載された【用法・用量(操作方法)】に従って使用してください。
- 2) 検体採取時に、だ液に触れないように注意してください。
検体にだ液が混入するとラインが薄くなる場合があります。
- 3) 品質の低下を防ぐため、高温多湿及び直射日光を避け、2～30℃で保存してください。
- 4) 本品を冷蔵保存していた場合は冷蔵庫から出して30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用ください。
- 5) テストプレートの入ったアルミ袋は使用時まで開封しないでください。
- 6) テストプレートの試料滴下部及び判定部を直接手などで触れないでください。
- 7) 付属のノズル(フィルター付き)を必ずご使用ください。
- 8) 付属のスワブは鼻腔用です。咽頭用としては、別売りの咽頭・角結膜用スワブをご使用ください。
- 9) 付属のスワブに破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れがあった場合は使用しないでください。
- 10) 軸が折れる可能性につながる為、次の様な使い方はしないでください。(スワブの添付文書をお読みください。)
 - ・ 検体採取時付属のスワブの軸部分(特に軸の細い部分)に力がかかり過ぎる、強く押す、過度の振れ負荷がかかるような使い方
 - ・ 軸を曲げる、反らす、折るなど意図的な変更を加えること
- 11) 鼻腔挿入時に、通常より明らかに軸の挿入距離が短く、抵抗を感知する場合には、無理に挿入操作を続けないこと。特に小児及び鼻腔狭小者においては、擦過時に軸にかかる抵抗が大きくなる可能性があるため、軸に力をいれて強く擦ったり、無理に回転させないでください。
- 12) 鼻腔からの検体採取時、スワブに鼻汁が塊として多量についた場合は、ガーゼ等で軽く塊を取り除いてください。但し、スワブの先端部分の表面に付着した粘膜表皮を検体としますので、強く拭き取ることは避けてください。
- 13) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。

3. 廃棄上の注意

- 1) 検査に使用したテストプレートやスワブ、ノズル、検体抽出液の容器、試料の残り等は、感染の可能性のあるものとして、必ずオートクレーブ処理(121℃、20分)するか、0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸して処理してください。試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。
- 2) 検体抽出液には、防腐剤としてアジ化ナトリウムが0.09%含まれています。アジ化ナトリウムを含む液を長期間にわたって廃棄しますと、排水管が金属の場合爆発性の金属アジドを生成することがありますので廃棄する場合には多量の水と共に流してください。

【貯蔵方法・有効期間】^{※※}

1. キットとしての保管方法及び有効期間
保管方法：2～30℃で保存する。
有効期間：27ヶ月
2. 各構成試薬の保管方法及び有効期間
 - 1) テストプレート：
保管方法：2～30℃で保存する。
有効期間：27ヶ月
 - 2) 検体抽出液
保管方法：2～30℃で保存する。
有効期間：27ヶ月

使用期限は、外装等に記載してあります。

【包装単位】

カタログ番号：IAHM1610 イムノエースhMPV 5テスト
IAHM1620 イムノエースhMPV 10テスト
(輸送用スワブ付)

【別売品】 IAHM1630 イムノエースhMPV テストプレート
5テスト

【参考文献】

1. Kikuta H, Sakata C, Gamo R, Ishizaka A, Koga Y, Konno M, Ogasawara Y, Sawada H, Taguchi Y, Takahashi Y, Yasuda K, Ishiguro N, Hayashi A, Ishiko H, Kobayashi K. Comparison of a lateral-flow immunochromatography assay with real-time reverse transcription-PCR for detection of human metapneumovirus. *J Clin Microbiol.* 2008;46(3):928-932.
2. Kaida A, Iritani N, Kubo H, Shiomi M, Kohdera U, Murakami T. Seasonal distribution and phylogenetic analysis of human metapneumovirus among children in Osaka City, Japan. *J Clin Virol.* 2006;35(4):394-399.
3. Montes M, Vicente D, Esnal O, Cilla G, Pérez-Trallero E. A PCR-restriction fragment length polymorphism assay to genotype human metapneumovirus. *Clin Microbiol Infect.* 2008;14(1):91-93.

【お問い合わせ先】

株式会社タウンス
0120-048-489
弊社ホームページのお問い合わせフォームもご利用ください。
ホームページアドレス：<http://www.tauns.co.jp/contact.php>



製造販売元

株式会社 **タウンス**

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1
TEL:0558-76-8181